


LTE

11:15

Glove Analysis

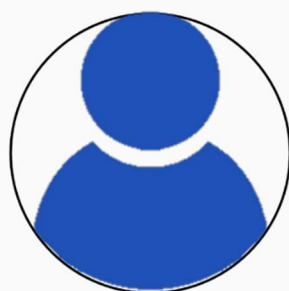

Usuário

Senha

[Esqueci minha senha](#)

ENTRAR

Antes do Teste

TABELA_PROFSSIONAL - Antes do Teste

LOGIN	
Usuário	nom_usu
Senha	sen_pro

MASSA DE TESTE

Usuário	Senha
aust.Ale	75_Z@lox0c

Depois do Teste

TABELA_PROFSSIONAL - Depois do Teste

LOGIN	
nom_usu	aust.Ale
sen_pro	75_Z@lox0c

Obs.: *Firebase* (Banco de Dados – NoSQL)

LTE

11:16

Glove Analysis

Selezione



Monitorar



Registro de Datos



Antes do Teste

MENU - Antes do Teste

Selecione a opção	
Monitorar	False
Registro de Dados	False
Cadastrar Paciente	False

MASSA DE TESTE

Usuário	Sistema
Toque	True

Depois do Teste

MENU - Depois do Teste

Selecione a opção	
Monitorar	True
Registro de Dados	False
Cadastrar Paciente	False

Obs.: *Firebase* (Banco de Dados – NoSQL)

LTE

11:17

Glove Analysis

Monitorar


Código

Número do RG

E-mail

Nome do Paciente

Nº do Telefone

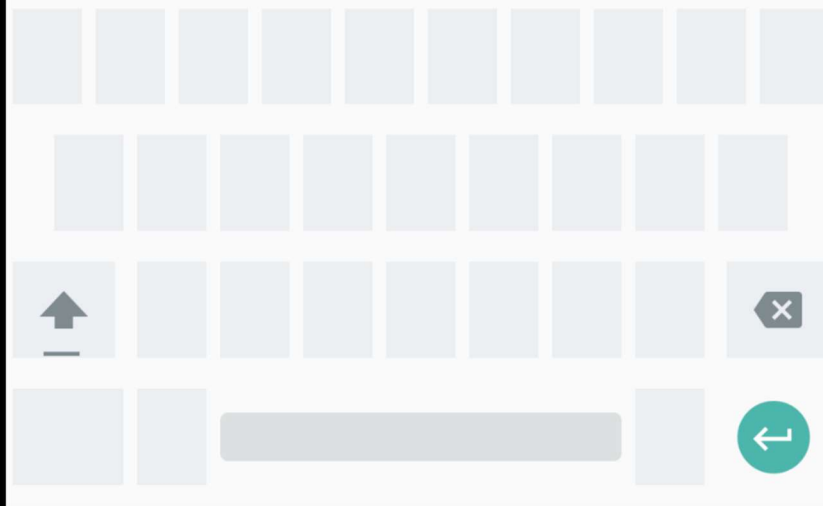

Antes do Teste

TABELA_PACIENTE - Antes do Teste

LOGIN	
Código do Paciente	cod_pac
Número de RG do Paciente	num_rg_pac
E-mail do Paciente	email_pac
Nome do Paciente	nom_pac
Telefone do Paciente	tel_pac

MASSA DE TESTE

Código do Paciente	Número de RG do Paciente	E-mail do Paciente	Nome do Paciente	Telefone do Paciente
591808	859235641	cintia_l.damacena@gmail.com	Cintia Larissa Damacena Couto	1599457451

Depois do Teste

TABELA_PACIENTE - Depois do Teste

LOGIN	
cod_pac	591808
num_rg_pac	85.923.564-1
email_pac	cintia_l.damacena@gmail.com
nom_pac	Cintia Larissa Damacena Couto
tel_pac	(15) 9945-7451

Obs.: *Firebase* (Banco de Dados – NoSQL)



Antes do Teste

MONITORAR - Antes do Teste

Escolha um movimento na tela	
Extensão	False
Flexão	False
Reposição	False
Oposição	False
Adução	False
Abdução	False
Flexão	False
Extensão	False
Abdução	False
Adução	False

MASSA DE TESTE

Usuário	Sistema
Toque	True


Depois do Teste

MONITORAR - Depois do Teste

Selecione a opção	
Extensão	False
Flexão	False
Reposição	False
Oposição	False
Adução	True
Abdução	False
Flexão	False
Extensão	False
Abdução	False
Adução	False

Obs.: *Firebase* (Banco de Dados – NoSQL)

Glove Analysis

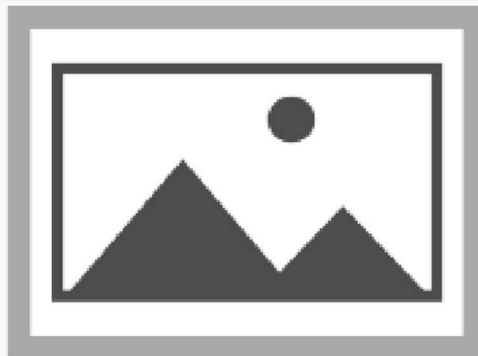

Valor em X

Valor em Y

Valor em Z

Concluir

Entrar

Antes do Teste

MOVIMENTO FUNCIONAL - Antes do Teste

Escolha um movimento na tela	
Valor do Sensor Flex - Dedo 1	0° - 180°
Valor do Sensor Flex - Dedo 2	0° - 180°
Valor do Sensor Flex - Dedo 3	0° - 180°
Valor do Sensor Flex - Dedo 4	0° - 180°
Valor do Sensor Flex - Dedo 5	0° - 180°
Valor do Sensor Força - Dedo 1	0% - 100%
Valor do Sensor Força - Dedo 2	0% - 100%
Valor do Sensor Força - Dedo 3	0% - 100%
Valor do Sensor Força - Dedo 4	0% - 100%
Valor do Sensor Força - Dedo 5	0% - 100%
Valor do Sensor Giroscópio X	0° - 360°
Valor do Sensor Giroscópio Y	0° - 360°
Valor do Sensor Giroscópio Z	0° - 360°

MASSA DE TESTE

Dispositivo	Sistema
Sensor correspondente	Valor fornecido

Depois do Teste

MOVIMENTO FUNCIONAL - Depois do Teste

Selecione a opção	
Valor do Sensor Flex - Dedo 1	10°
Valor do Sensor Flex - Dedo 2	12°
Valor do Sensor Flex - Dedo 3	14°
Valor do Sensor Flex - Dedo 4	9°
Valor do Sensor Flex - Dedo 5	11°
Valor do Sensor Força - Dedo 1	25%
Valor do Sensor Força - Dedo 2	23%
Valor do Sensor Força - Dedo 3	21%
Valor do Sensor Força - Dedo 4	30%
Valor do Sensor Força - Dedo 5	26%
Valor do Sensor Giroscópio X	5°
Valor do Sensor Giroscópio Y	3°
Valor do Sensor Giroscópio Z	12°

Obs.: *Firebase* (Banco de Dados – NoSQL)

7:45

Glove Analysis

Selecione



Monitorar



Registro de Dados



Cadastrar Paciente

Antes do Teste

MENU - Antes do Teste

Selecione a opção	
Monitorar	False
Registro de Dados	False
Cadastrar Paciente	False

MASSA DE TESTE

Usuário	Sistema
Toque	True

Depois do Teste

MENU - Depois do Teste

Selecione a opção	
Monitorar	False
Registro de Dados	True
Cadastrar Paciente	False

Obs.: *Firebase* (Banco de Dados – NoSQL)

LTE

11:21

Glove Analysis

Registro de Dados

Pesquisar paciente por

Código


Digite abaixo

Data Inicial

Data Final

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

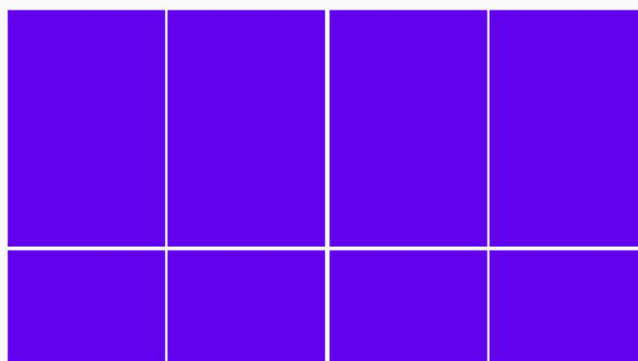

Antes do Teste

TABELA_PACIENTE - Antes do Teste

LOGIN	
Código do Paciente	cod_pac
Número de RG do Paciente	num_rg_pac
E-mail do Paciente	email_pac
Nome do Paciente	nom_pac
Telefone do Paciente	tel_pac
Data e Hora do Registro	dat_hor

MASSA DE TESTE

Código do Paciente	Número de RG do Paciente	E-mail do Paciente	Nome do Paciente	Telefone do Paciente
591808	859235641	cintia_l.damacena@gmail.com	Cintia Larissa Damacena Couto	1599457451

Data e Hora do Registro
2022-05-10 16:45

Depois do Teste

TABELA_PACIENTE - Depois do Teste

LOGIN	
cod_pac	591808
num_rg_pac	85.923.564-1
email_pac	cintia_l.damacena@gmail.com
nom_pac	Cintia Larissa Damacena Couto
tel_pac	(15) 9945-7451
dat_hor	10/05/2022

Obs.: *Firebase* (Banco de Dados – NoSQL)

LTE

11:23


Glove Analysis

Data Inicial

xx/xx/xxxx

Data Final

xx/xx/xxxx

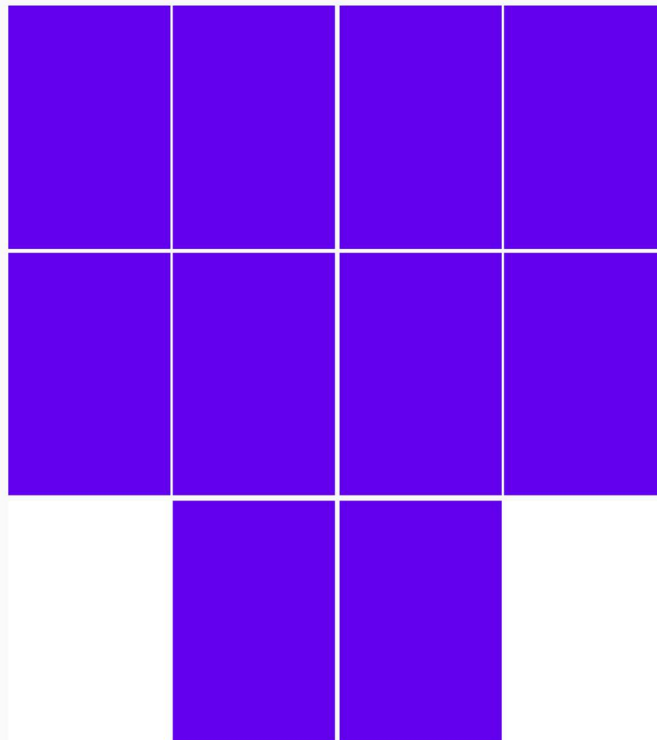

Enviar Relatório

Gerar Gráfico

Antes do Teste

MONITORAR - Antes do Teste

Escolha um movimento na tela	
Extensão	False
Flexão	False
Reposição	False
Oposição	False
Adução	False
Abdução	False
Flexão	False
Extensão	False
Abdução	False
Adução	False

MASSA DE TESTE

Usuário	Sistema
Toque	True

Depois do Teste

MONITORAR - Depois do Teste

Selecione a opção	
Extensão	False
Flexão	False
Reposição	False
Oposição	False
Adução	True
Abdução	False
Flexão	False
Extensão	False
Abdução	False
Adução	False

Obs.: *Firebase* (Banco de Dados – NoSQL)

7:45

Glove Analysis

Selecione



Monitorar



Registro de Dados



Cadastrar Paciente

Antes do Teste

MENU - Antes do Teste

Selecione a opção	
Monitorar	False
Registro de Dados	False
Cadastrar Paciente	False

MASSA DE TESTE

Usuário	Sistema
Toque	True

Depois do Teste

MENU - Depois do Teste

Selecione a opção	
Monitorar	False
Registro de Dados	False
Cadastrar Paciente	True

Obs.: *Firebase* (Banco de Dados – NoSQL)

LTE

11:24

Glove Analysis



Código

RG

Nome Completo

Nascimento

Gênero:

☐ Masculino

☐ Feminino

Telefone

Endereço

E-mail

Observações

CADASTRAR

Antes do Teste

TABELA_PACIENTE - Antes do Teste

LOGIN	
Código do Paciente	cod_pac
Número de RG do Paciente	num_rg_pac
Nome do Paciente	nom_pac
Data de Nascimento	dat_nasc_pac
Gênero Masculino/Feminino	gen_pac
Telefone do Paciente	tel_pac
Endereço do Paciente	end_pac
E-mail do Paciente	email_pac
Observação sobre o Paciente	obs_pac

MASSA DE TESTE

Código do Paciente	Número de RG do Paciente	E-mail do Paciente	Nome do Paciente	Telefone do Paciente
591808	859235641	cintia_l.damacena@gmail.com	Cintia Larissa Damacena Couto	1599457451
Data de Nascimento	Gênero Masculino/Feminino	Endereço do Paciente	Observação sobre o Paciente	
12031994	Feminino	Rua Orlando Dias Ribeiro, 56 - Jardim Europa, Osasco - SP	Possuí Tendinite	

Depois do Teste

TABELA_PACIENTE - Depois do Teste

LOGIN	
cod_pac	591808
num_rg_pac	85.923.564-1
nom_pac	Cintia Larissa Damacena Couto
dat_nasc_pac	12/03/1994
gen_pac	Feminino
tel_pac	(15) 9945-7451
end_pac	Rua Orlando Dias Ribeiro, 56 - Jardim Europa, Osasco - SP
email_pac	cintia_l.damacena@gmail.com
obs_pac	Possuí Tendinite

Obs.: *Firebase* (Banco de Dados – NoSQL)